

KIT SP500

Le dispositif de bio-nettoyage vapeur polyvalent pour une application quotidienne renforcée



■ ■ Fabriqué en France par Sanivap selon la norme ISO 13485.
Les appareils SANIVAP sont des dispositifs médicaux de Classe IIa - Organisme notifié : GMED 0459

Le **Kit SP500** assure le bio-nettoyage des surfaces : sols, plafonds, murs, mobilier, dispositifs médicaux...
La qualité constante de la vapeur du **Kit SP500** évite le ré-encrassement des surfaces, et assure un résultat de propreté et de désinfection optimal : bactéricide, levuricide, fongicide, virucide. Intégré à son chariot de bio-nettoyage et compatible avec une gamme étendue d'accessoires adaptables, son utilisation est simple et adaptée aux protocoles d'entretien journalier.



FACILITÉ D'UTILISATION

Dispositif équipé d'un écran de contrôle et d'un réglage des différentes plages afin de faciliter son utilisation.



ÉCONOMIE

La méthode vapeur dispense de l'utilisation de produits détergents et désinfectants et la consommation d'eau est diminuée.



FIABILITÉ ET PERFORMANCE

Utilisation professionnelle intensive, autonomie jusqu'à 8 heures par jour et remplissage en continu possible.



EFFICACITÉ BIOCIDES ET QUALITÉ VAPEUR

Vapeur à haute température, sous pression et désinfectante avec contrôle permanent des paramètres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (L x l x H cm)	96 x 53 x 107 cm
---------------------------	------------------

Longueur (cm)	
- Gaine vapeur	4,5 m
- Câble électrique néoprène	10 m

Poids à vide	25 kg
--------------	-------

Colisage	
- Dimensions (L x l x H cm)	58 x 35 x 52 cm
- Poids	27 kg

Chaudière	
- Volume total	3.1 L
- Matière / qualité	Inox 316 L
- Pression	5 bars
- Température	160°C
- Dispositif auto-remplissage	oui
- Débit vapeur	0 à 90 g/min

Puissance électrique	
- Alimentation	230v - 50 Hz
- Chaudière	2800w
- Puissance totale absorbée	2850w
- Thermoplongeur, démontable et anticorrosion	oui

Capacité des réservoirs	
- Eau pour production vapeur	6 L
- Réservoir d'eau additionnel	4 L

Filtre sortie vapeur	oui
----------------------	-----

Indice de protection électrique	
- Appareil	IP 44
- Boîtier électronique étanche	IP 56

Normes d'efficacité de désinfection	NF T72-110 NF S98-120
-------------------------------------	--------------------------

RÉFÉRENCES

APPAREIL	RÉFÉRENCE FRANCE	RÉFÉRENCE MONDE
Kit SP500	SP500KIT	8600.500K

LE PROCESSUS DE BIO-NETTOYAGE

1. PRÉPARATION

Préparation du Kit SP500 et vérifications (niveau d'eau, propreté des accessoires, branchements, purge...).

2. ACTION VAPEUR

La vapeur agit en tant que tensioactif et met en suspension les salissures présentes sur les surfaces. Le contrôle permanent des paramètres de la vapeur par l'appareil assure son efficacité.

3. ACTION MÉCANIQUE

Le mouvement de l'utilisateur et la microfibre captent les salissures.

4. ACTION CHALEUR

La haute température détruit les bactéries et autres germes.

5. PHASE DE SÉCHAGE

La chaleur résiduelle est restituée et le support devient immédiatement sec, évitant ainsi le développement de germes.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Avant toute utilisation, lire toutes les informations concernant le produit. La notice d'utilisation est disponible sur demande par email : info@sanivap.fr

CONTENU DU KIT SP500



**Générateur vapeur
SP500 / 8600.500**
Notre générateur
vapeur 2850w.



**Chariot
SP150 / 8620.150**
Permet une plus
grande mobilité.




**Gaine vapeur
SP55 / 8630.55**
Avec poignée
ergonomique à
commandes tactiles.



**Support microfibre
SP240 / 8620.240**
Pour les petites
surfaces hautes et
planes.



**Brosse 20 cm
SP220 / 8620.220**
Pour les petites
surfaces hautes.

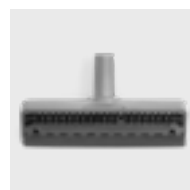

**Brosse raclette
SP230 / 8620.230**
Pour les petites
surfaces hautes ou
verticales.



**Buse coudée
SP200 / 8620.200**
Pour les zones
étroites et difficiles
d'accès.



**Balai MOP vapeur
SP250 / 8620.250**
Pour les sols, murs et
plafonds.



**Guide gaine
SP151 / 8620.151**
Pour une meilleure
ergonomie lors de
l'utilisation.



**Bidon de remplissage
SN1319**
Bidon vide de 5L
pour faciliter le
remplissage du
générateur.



**Clé de vidange
SN1320**
Facilite la vidange de
l'appareil (à effectuer
toutes les 20 heures
de chauffe).



**Kit joints
SP34 / 8650.34**
Pour l'entretien des
joints de l'appareil
(à effectuer une fois
par mois).